




Noble Light Typ 654 ist auch mit Auflicht für indirekte Ausleuchtung lieferbar !!

TECHNISCHE DATEN:

Bezeichnung:	Umfeldbeleuchtung - spezialangefertigte Zahnarztbeleuchtung.
Größe:	Außenabmessungen: L=1260 mm, B=614 mm, H=54 mm.
Gewicht:	11,4 kg.
Material:	Aluminiumprofile. Reflektoren aus reinem, 99,99-prozentigem Aluminium. Die Armaturen werden mit Leuchtstoffröhren von bester Farbwiedergabe geliefert.
Farbe:	Reinweiß, RAL 9010
Belüftung:	Ventilator 20 m³/h, geringe Drehzahl, 30 dBA; er kühlt die Leuchtstoffröhren für einen optimalen Wirkungsgrad und erzeugt zudem einen Überdruck in der Armatur. Am Lüfter ist ein leicht zu reinigender Filter angebracht. Der Filter verhindert, dass Staub eindringt und die Lichtausbeute verringert.
Stromanschluss:	230 V einschl. 2,5 m Kabel mit Netzstecker.
Stromverbrauch:	324 W + 108 W (bei voller Lichtleistung)
Anzahl der Leuchtstoffröhren:	6 + 2 Oberlicht
Vorschaltgeräte:	HF, dimmbar
Beleuchtungsstärke:	ca. 6000 Lux - bei einem Abstand von 1400 mm von der Mundhöhle.
Blendschutz:	Vollreflexraster für maximale Lichtausbeute. Die Armaturen sind mit einem IR-Filter versehen, um eine Wärmeabstrahlung nach unten zu verhindern.
Aufhängung:	Drahtseil - 4 Stk. HINWEIS: Für die Montage wird kein Werkzeug benötigt.
Umwelt/Recycling:	Bis auf die Leuchtstoffröhren kann das gesamte Material der Armaturen wiederverwendet werden.

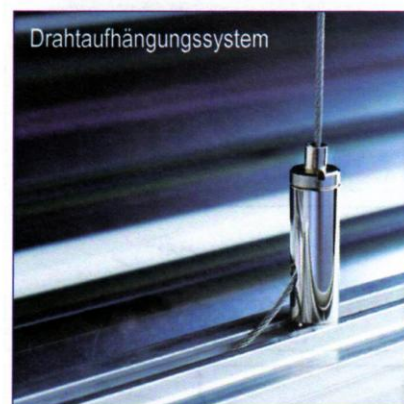

Preis zzgl. MwSt. € 1.280.—